



HemCon® ChitoGauze®XR PRO

X-RAY
detectable


Intended Use / Indications:

HemCon ChitoGauzeXR PRO is a hemostatic dressing for the external, temporary control of severely bleeding wounds.

ChitoGauzeXR PRO Instructions for use:

1. Open foil pouch and remove ChitoGauzeXR PRO.
2. Identify and cover the source of bleeding with the dressing, apply direct digital pressure to the source of bleeding.
3. Pack dressing completely into wound track. Use enough ChitoGauzeXR PRO to the wound and contact all bleeding surfaces. More than one dressing may be required.
4. If cutting the dressing to a smaller desired size, ensure the radiopaque element is included in the parts you are using.
5. Apply pressure until bleeding is controlled.
6. Wrap and secure dressing on wound to maintain pressure.

FOR USE BY TRAINED EMERGENCY RESPONDERS

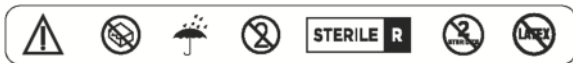

Cautions / Warnings:

FOR EXTERNAL USE ONLY, DO NOT IMPLANT.

Do not use if seal is broken and/or contents are wet. Do not apply over eyes. Do not use near the spine. Use promptly after opening. Contains chitosan from shellfish. Single use only. Discard any unused portion of the product. Do not resterilize. Not made with natural rubber latex.

Seek Medical Attention:

- If bleeding does not stop or redness or swelling occurs.
- If you suspect an allergic reaction.



HemCon® ChitoGauze®XR PRO

Mit Röntgenstrahlen
nachweisbar

Indikationen:

HemCon ChitoGauzeXR PRO ist ein blutstillender Verband für die externe, vorübergehende Versorgung von stark blutenden Wunden.

ChitoGauzeXR PRO Gebrauchsanweisung:

1. Öffnen Sie den Folienbeutel öffnen und entnehmen Sie ChitoGauzeXR PRO.
2. Ermitteln Sie die Blutungsquelle ermitteln und bringen Sie den Verband mittels direktem digitalem Druck auf die Blutungsquelle auf.
3. Drücken Sie den Verband vollständig auf die ganze Fläche der Wunde. Verwenden Sie genug ChitoGauzeXR PRO, um die Wunde zu füllen und alle blutenden Oberflächen zu bedecken. Dazu sind möglicherweise mehrere Verbände erforderlich.
4. Wenn Sie einen Verband auf die gewünschte Größe zuschneiden, vergewissern Sie sich, dass sich der röntgendichte Teil in den von Ihnen verwendete Teilen befindet.
5. Halten Sie den Druck aufrecht, bis die Blutung gestillt ist.
6. Sichern Sie den Verband mit einem Wickel auf der Wunde, um den Druck zu erhalten.

ZUR VERWENDUNG DURCH GESCHULTE ERSTHELFER



Warnhinweise:

NUR ZUR ÄUßERN ANWENDUNG, DARF NICHT IMPLANTIERT WERDEN.

Nicht verwenden, falls die Versiegelung beschädigt ist und/oder der Inhalt feucht geworden ist. Nicht am Auge anwenden. Nicht in der Nähe der Wirbelsäule verwenden. Sofort nach dem Öffnen verwenden. Enthält Chitosan aus Krustentierschalen. Nur zur einmaligen Verwendung. Nicht genutztes Material bitte wegwerfen. Nicht erneut sterilisieren. Besteht nicht aus Naturkautschuklatex.

In folgenden Fällen einen Arzt zu Rate ziehen:

- Bei anhaltender Blutung oder Auftreten von Rötung oder Schwellung.
- Bei Verdacht auf allergische Reaktion.