


Safety Waste Caps Technische Details



Filtersystem gegen schädliche Dämpfe.

Abluftfilter in verschiedenen Größen und unterschiedlichen Standzeiten finden Sie auf **Seite 73**.

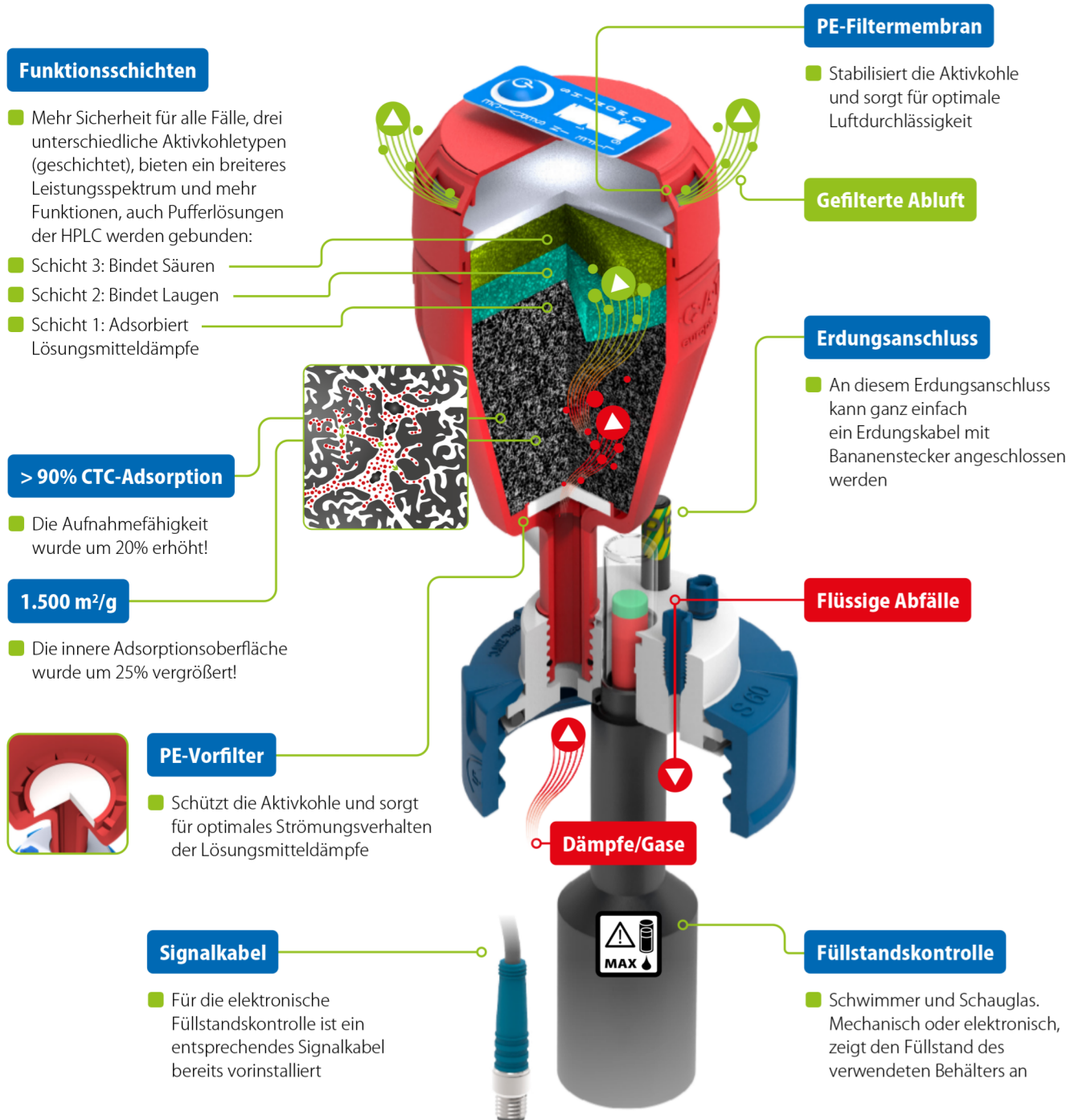

Den richtigen Behälter parat?

Nutzen Sie Safety Waste Caps auf Ihren vorhandenen Behältern, oder bestellen Sie passende Kanister gleich mit! Ab **Seite 142**.

Die SCAT Abluftfilter für Safety Waste Caps


Verbrauchte Filter? - Regelmäßig wechseln!

Der Abluftfilter ist optimiert für die Aufnahme von Lösungsmitteldämpfen HPLC-typischer Eluenten. Zwei zusätzliche Aktivkohleschichten binden Dämpfe von Säuren und Laugen. Die Lebensdauer des Filters ist u.a. abhängig von der Zusammensetzung der gesammelten Abfälle, Temperatur und Flussrate. Diese Faktoren können je nach Kunde bzw. Anwendung stark variieren. Damit Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite sind, empfehlen wir einen Austausch alle 3 (Filter S); 6 (Filter M); 12 (Filter L) Monate* für optimalen Schutz.



Wechselanzeige

Einfache Aktivierung per Knopfdruck!

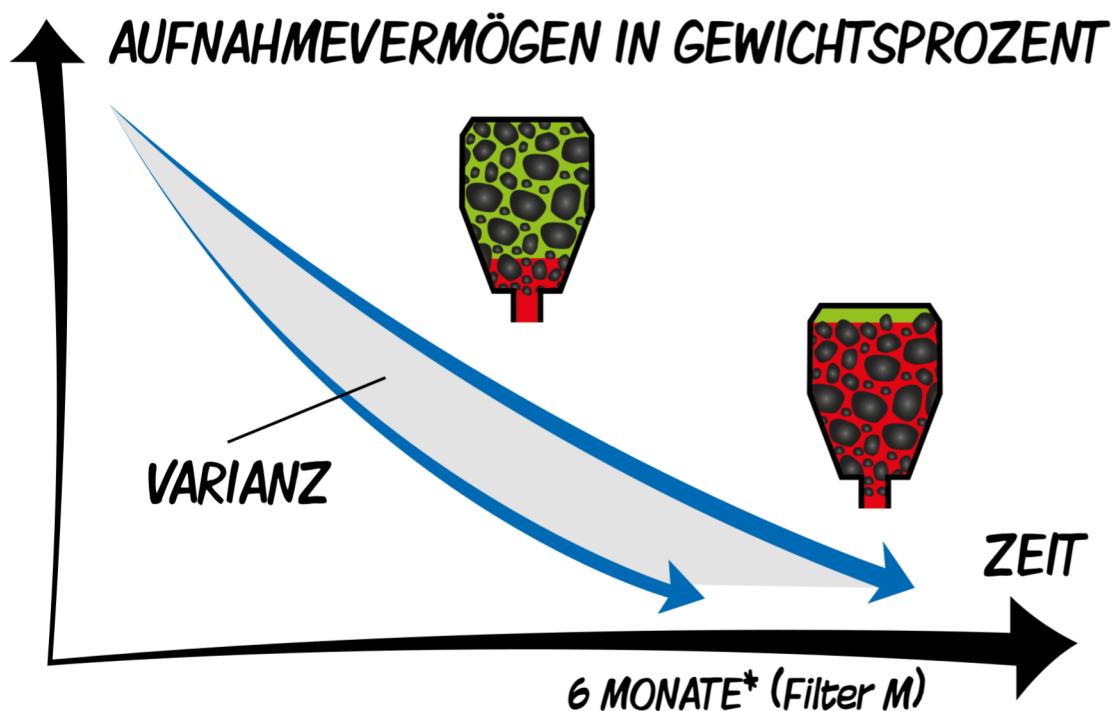

*Standzeiten bei HPLC-typischen Flussraten von 1,5 - 4,0 ml pro Minute.